



Надежно

Сертифицированный гигиенический дизайн (3A/EHEDG) и материалы, разрешенные по EG 1935/2004 и FDA

Экономично

Три прибора – четыре измеренных значения: уровень, давление в емкости и давление в трубопроводе, температура

Удобно

Можно сохранять и передавать данные процесса

Реактор с псевдоожиженным слоем (фармацевтика)

Измерение уровня и контроль фильтра при гранулировании в реакторе с псевдоожиженным слоем

Одним из методов производства и сушки гранулированных продуктов является процесс в псевдоожиженном слое. Через решетку-основание псевдоожиженного слоя равномерно подается воздушный поток. Сверху впрыскивается суспензия, которая гранулируется в воздушном потоке, полученный гранулят собирается на решетке. Отработавший воздух выходит через фильтр для очистки. Для обеспечения эффективного процесса и стабильно высокого качества гранул нужно непрерывно контролировать количество гранулята на решетке и состояние фильтра. Применяемая измерительная техника должна отвечать высочайшим гигиеническим требованиям.

[Подробнее](#)




VEGABAR 82

Преобразователь давления для контроля фильтра и измерения уровня при гранулировании в псевдоожиженном слое

- Высокая стойкость керамической измерительной ячейки CERTEC® к абразивным частицам
- Высочайшая надежность и безопасность эксплуатации
- Присоединения заподлицо позволяют проводить оптимальную безразборную очистку и стерилизацию

[Показать продукт](#)

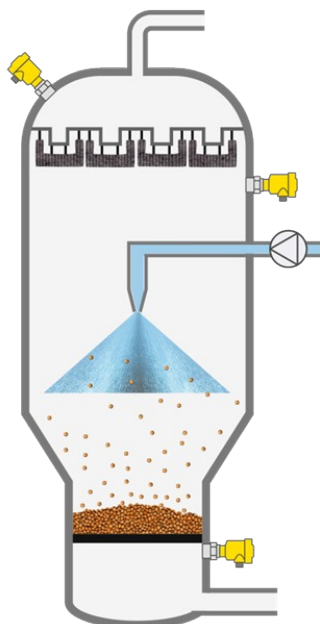

VEGABAR 82

[Показать продукт](#)**Диапазон измерения расстояния**

-

Диапазон измерения давления

-1 ... 100 бар

Температура процесса

-40 ... 150 °C

Давление процесса

-1 ... 100 бар

Точность измерения

0,05 %

Материалы в контакте со средой

PVDF

316L

Сплав C22 (2.4602)

PP

1.4057

1.4410

Сплав C276 (2.4819)

Дуплекс (1.4462)

Titan Grade 2 (3.7035)

Резьбовое присоединение≥ G $\frac{1}{4}$, ≥ $\frac{1}{4}$ NPT**Фланцевое присоединение**≥ DN15, ≥ $\frac{1}{2}$ "**Гигиенические присоединения**

Зажим ≥ 1" - DIN32676, ISO2852

Резьбовое трубное соединение ≥ DN25 - DIN 11851

Асепт. присоединение с натяжным фланцем - DN32

Асепт. присоединение с шлицевой накидной гайкой -

F40

Присоединение DRD ø 65 мм

SMS 1145 DN51

SMS DN38

Резьбовое соединение Swagelok VCR

Varivent G125

Varivent N50-40

Для NEUMO BioControl D50 PN16 / 316L

Материал уплотнения

EPDM

FKM

FFKM