


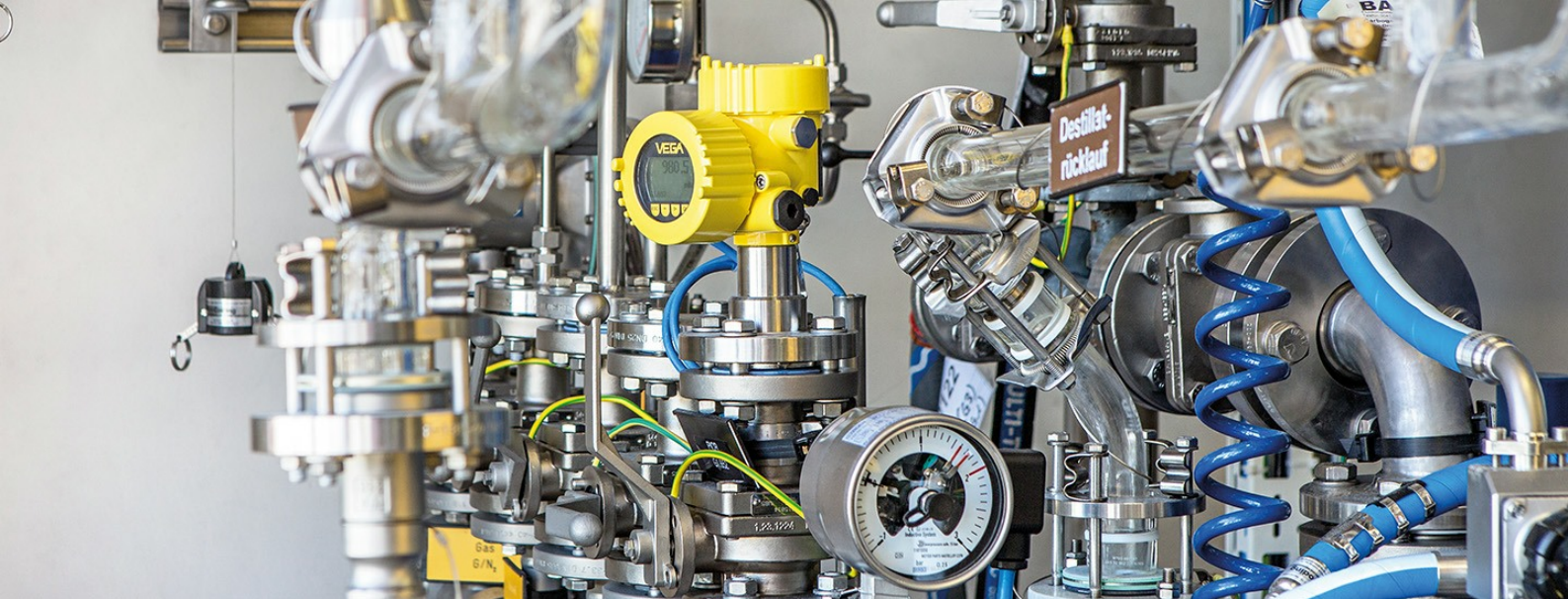

Надежно

Сертифицированный гигиенический дизайн (3A/EHEDG) и материалы, разрешенные по EG 1935/2004 и FDA

Экономично

Непрерывная работа с обеспечением абсолютной гигиены

Удобно


Стандартизированная настройка, сохранение и передача данных процесса

Смесители в фармацевтической отрасли

Измерение уровня в смесителе и измерение давления в подводящем трубопроводе

Смесительные емкости применяются для изготовления и хранения самых разных фармацевтических продуктов, включая антибиотики, препараты плазмы крови, растворы для внутримышечных и внутривенных инъекций. Для обеспечения безопасности процесса необходимо надежное и непрерывное измерение уровня в емкости.

[Подробнее](#)

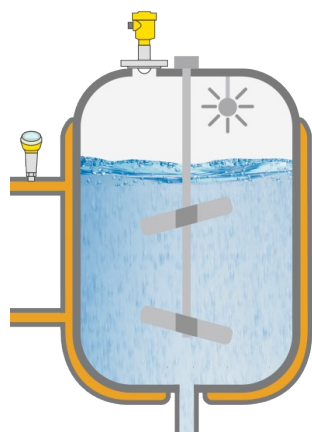

VEGABAR 38

Преобразователь давления с интерфейсом IO-Link для контроля давления на патрубке подачи теплоносителя

- Высокая надежность измерения, быстрое время реакции
- Прочная керамическая измерительная ячейка CERTEC®, длительный срок службы
- Простота настройки со стандартизированным операционным меню и встроенным дисплеем

[Показать продукт](#)



VEGAPULS 6X

Радарный уровнемер для бесконтактного измерения уровня в смесительной емкости

- Надежное измерение уровня независимо от условий процесса, таких как вакуум, давление, температура и переменная плотность продукта
- Фланец с герметизированной антенной системой позволяет проводить оптимальную безразборную очистку и стерилизацию
- Малый угол раствора и хорошая фокусировка упрощают ориентацию датчика

[Показать продукт](#)

BASIC	PRO
VEGABAR 38 Показать продукт	VEGAPULS 6X Показать продукт
	
Диапазон измерения давления -1 ... 60 бар	Диапазон измерения расстояния 120 м
Температура процесса -40 ... 130 °C	Температура процесса -196 ... 450 °C
Точность измерения 0,3 %	Давление процесса -1 ... 160 бар
Материалы в контакте со средой PVDF 316L Дуплекс (1.4462) Керамика	Точность измерения ± 1 мм
Резьбовое присоединение ≥ G¾, ≥ ¼ NPT	Частота 6 GHz 26 GHz 80 GHz
Гигиенические присоединения Зажим ≥ 2", DN50 - DIN32676, ISO2852 Зажим ≥ 1" - DIN32676, ISO2852 Зажим ≥ 1½" - DIN32676, ISO2852 Резьбовое трубное соединение ≥ 1½", ≥ DN40 - DIN 11851 Резьбовое трубное соединение ≥ DN25 - DIN 11851 SMS DN38 Асептические резьбовые соединения ≥ DN25 - DIN11864-1-A Асептические резьбовые соединения ≥ DN40 - DIN11864-1-A Varivent N50-40 SMS DN25 Присоединение Ingold PN10 Varivent F25	Угол излучения ≥ 3°
Материал уплотнения EPDM FKM FFKM	Материалы в контакте со средой PTFE PVDF 316L PP PEEK
Материал корпуса Пластик	Резьбовое присоединение ≥ G¾, ≥ ¼ NPT
Степень защиты IP66/IP67 IP65	Фланцевое присоединение ≥ DN20, ≥ ¾"
Выход 4 ... 20 mA 3-провод. (PNP / NPN, 4... 20 mA) IO-Link	Гигиенические присоединения Зажим ≥ 1½" - DIN32676, ISO2852 Резьбовое трубное соединение ≥ 2", DN50 - DIN 11851 Varivent ≥ DN25 Асепт. присоединение с натяжным фланцем - DN32 Асепт. присоединение с шлицевой накладной гайкой - F40 Асептические резьбовые соединения ≥ DN50 труба ø53 - DIN11864-1-A Асептическое фланцевое соединение ≥ DN50 - DIN11864-2 Асептическое зажимное соединение ≥ DN50 труба ø53 - DIN11864-3-A Присоединение DRD ø 65 мм SMS 1145 DN51